


OMRON E4 TENS

Elektronikus idegstimulátor és masszázs készülék

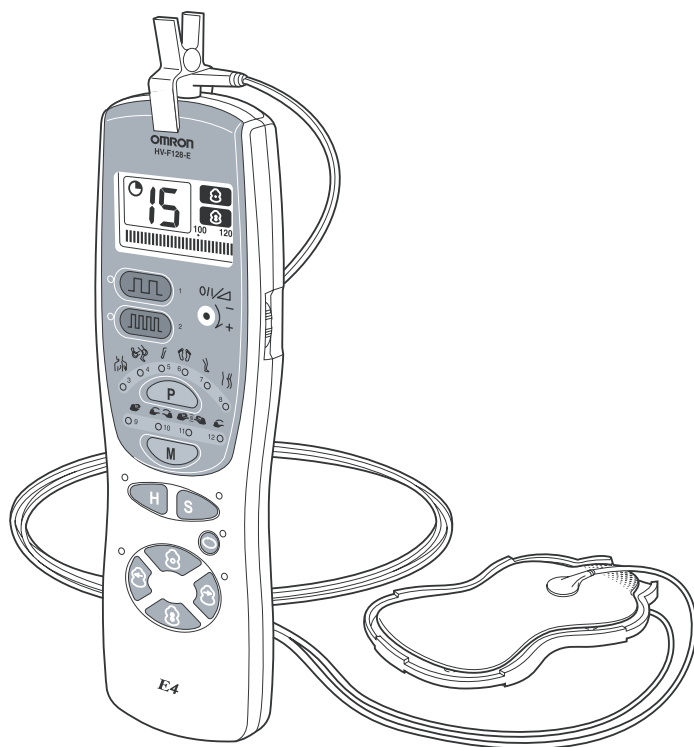

CE 0197

Használati utasítás

Az egészség érzése

Tartalomjegyzék	Oldal
1. Biztonsági előírások	4
2. A készülék felépítése	4
2.1 Szabályozó funkciók	5
3. A készülék helyes használata	6
3.1 Programozás	6
3.2 Beállítások	7
4. Üzembehelyezés	7
4.1 Elemek behelyezése	7
4.2 A készülék első használata	8
4.3 Az elektródák felhelyezése	9
5. A kezelés technikája	10
5.1 Kezelő program	10
5.2 Beállítás	10
6. A kezelés befejezése és karbantartás	11
7. Tárolás	12
8. Hibaelhárítás és karbantartás	11
8.1 Karbantartás és tartalék alkatrészek	13
8.2 Elemek cseréje	13
9. Műszaki adatok	14



Bevezetés

Az OMRON E4 TENS olyan elektronikus idegstimulátor és masszázskészülék, amely csökkenti a fájdalmat és az izmok fáradtságát. A test különböző részeinek kezelésére alkalmas, pl.: váll, térd, könyök, talp, lábikra és a derék.

1. Biztonsági előírások

Általános

- Gyerekek és fogyatékosok csak felügyelettel használhatják.
- Kezelés közben ne helyezzük át a tappancsokat más személyre.

Ne használjuk a készüléket a következő esetekben:

- Ha valakinek implantátuma pl. pacemaker-e van.
- Más orvosi készülékkel egyidejűleg pl. respirátor vagy EKG.
- Azokban az esetekben, amikor az orvos az alacsony frekvenciás elektroterápiát nem találja megfelelőnek.
- Autóvezetés közben.
- Alvás közben.

Egyeztessen a kezelőorvosával a következő esetekben:

- Heveny, ragályos vagy fertőző betegség.
- Rosszindulatú daganat.

- Terhesség, menstruáció.
- Szívelégtelenség, abnormális vérnyomás.
- Visszértágulás.
- Magas láz.
- Más orvosi kezeléssel egyidejűleg, kiváltképp, ha az kényelmetlenséggel jár.


Használati javaslatok:

- Ne használjunk kenőcsöket a kezelés előtt az elektródák (tappancsok) alá.
- Ne használjuk az elektródákat a szív közelében.
- Ne használjuk a tappancsokat a bőrön, ha azt irritálja.
- Egy adott testrész kezelése maximum 30 perc.

Figyelmeztetés

- Ne ejtsük le a készüléket.
- Az elektródákat csak a bőrre, vagy a tartólapra helyezzük, hogy elkerüljük a tapadóképeség sérülését.
- Ne használjuk a készüléket szaunában, fürdőkádban vagy zuhanyozás közben.
- Kezelés közben a mobiltelefon ne legyen 5 méter távolságban belül.


2. A készülék felépítése:

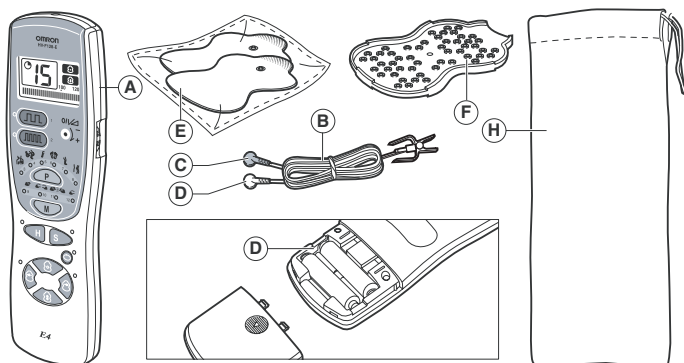

- A** Készülék
- B** Elektromos kábel biztonsági csatlakozó dugóval
- C** Vörös csatlakozó
- D** Fehér csatlakozó

- E** tartós elektródák (tappancsok)
- F** Elektróda tartólap
- G** Elemtartó
- H** Tároló tok

2.1 Szabályozó funkciók

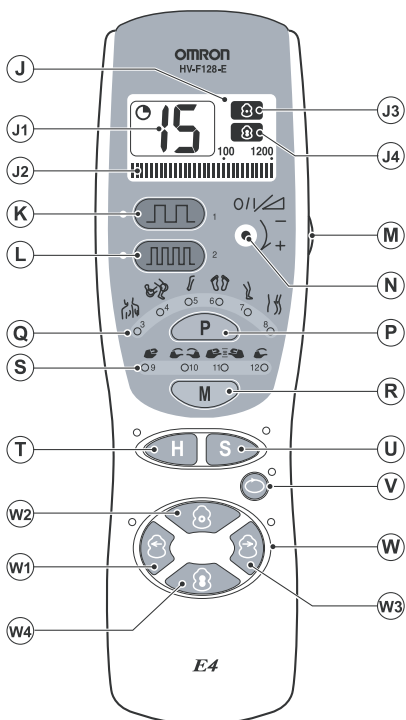













- J** Folyadékkristályos kijelző
- J1** kezelésből hátralévő idő percekben
- J2** kúszósáv, a frekvenciát mutatja
- J3** pont kezelés kijelzése
- J4** széles kezelés kijelzése
- K** Alacsony frekvencia gomb: kezelés kiválasztása feszes izmokra
- L** Magas frekvencia gomb: kezelés kiválasztása akut fájdalmakra
- M** Ki/be kapcsoló és intenzitás-szabályozó: a készülék ki-be kapcsolására és az intenzitás szabályozására szolgál
- N** Kijelző, mely mutatja a ki/be kapcsolt állapotot, ill. az intenzitást 0-tól 10-ig
- P** Testrész gomb: kiválasztja az adott területet
- Q** Testrész gomb kijelzője (váll, ízületek, kar, talp, láb, hát)
- R** Masszázs módja kiválasztó gomb: kiválasztható a legkedvezőbb masszázs típusa
- S** Masszázs módjának kijelzése (ütögető, gyúró, nyomkodó és dörzsölő)
- T** Hyper gomb: lenyomásával növelhető az intenzitás
- U** Soft gomb: lenyomásával csökkenthető az intenzitás
- V** Ismétlő gomb: a lenyomásával a kellemesnek érzett kezelés megismételhető
- W** Pont/Széles kezelés:
 - W1** Bal (piros) tappancs
 - W2** Kezelés csak az egyik ponton
 - W3** Jobb (fehér) tappancs
 - W4** Kezelés széles területen

3. A készülék helyes használata

3.1 Programozás

A megfelelő kezelés eléréséhez 12 program áll rendelkezésre (lásd táblázat).

A kezelőprogramok futási ideje 15 perc.

1	Feszés izmok, zsibbadtság		Hullámformák különböző kombinációja alacsony frekvencián, mely élénkíti a vérkeringést. Ez a program hosszú ideig hatásos.
2	Akut fájdalom		Magas frekvenciájú hullámokkal működik, az akut fájdalmat hatásosan, azonnal enyhíti.
3	Merev váll		Különböző hullámformák élénkítik a vérkeringést, és csökkentik a fáradtságot.
4	Izületi fájdalom		Magas frekvenciás hullámok a fájdalmat hatékonyan csökkentik a kezelt területen
5	Kar fáradtság		Különböző hullámok élénkítik a vérkeringést
6	Puffadt láb és lábfáradtság		Különböző hullámok élénkítik a vérkeringést és a testfolyadékok keringését a lábokban.
7	Puffadt és fájdalmas boka, lábszár		Különböző hullámok élénkítik a vérkeringést és a testfolyadékok keringését a végtagokban
8	Hátfájdalom, vagy derék merevség		Alacsonyfrekvenciás hullámok élénkítik a vérkeringést és csökkentik a fájdalmat (neuralgia).
9	Egyéb tünetek		Az Ön kedvenc hullámformái: ütőgető-gyúró - nyomkodó - dörzsölő - csökkenti a merevséget, a fájdalmat és a fáradtságot
10			
11			
12			

3.2 Beállítások

Számos beállítási lehetőség van a kedvenc kezelés elérésére. Ön kialakíthatja a kedvenc kezelési módot a kezelési program indítása előtt, és bármikor meg is változtathatja azt.

Hyper mód és soft mód.




Ön választhatja akár a Hyper, akár a Soft módot. A Hyper mód egy fokozattal növeli a stimuláció intenzitását a kezelés közben, és hatékonyan csökkenti a fájdalomérzetet. A Soft mód irritáció érzet nélkül stimulál, és kellemes érzetben csökkenti a merevséget.

Kezelési terület



A kezelés alkalmazható egy adott ponton, vagy a tappancsok által határolt nagyobb felületen.

Erősség (intenzitás)

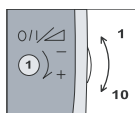

A kezelés erőssége állítható a gombbal.


Ismétlés




A jöleső stimuláció megismételhető. Ha az ismétlőgombot megnyomjuk, a készülék a kezelőprogram előző ciklusát megismétli. A készülék a gomb újrabenyomásával folytatja a kezelőprogramot.

4. Üzembehelyezés


4.1 Elemek behelyezése

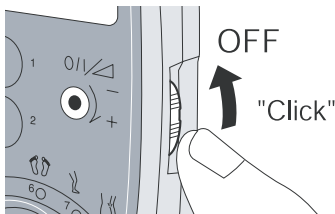


1. Kapcsoljuk a ki/be kapcsolót KI (OFF) állásba
2. Távolítsuk el az elemtartó fedelét

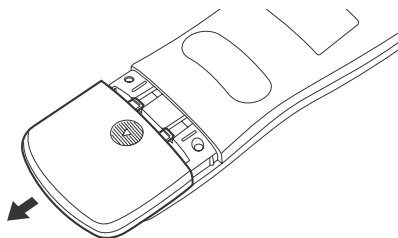


3. Helyezzünk két elemet az elemtartóba. Figyelmeztetés! Használjunk két egyforma elemet!

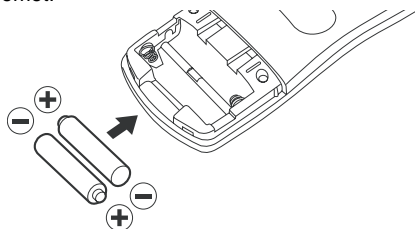

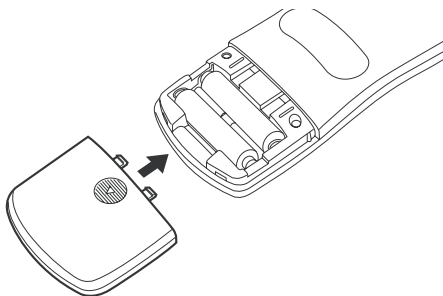


4. Helyezzük vissza az elemtartó fedelét


4.2. A készülék első használata

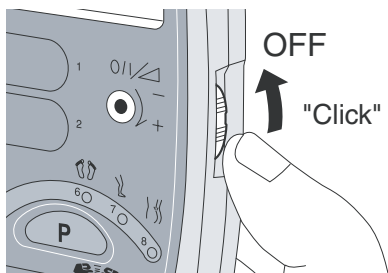


Figyelem! Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva, és az elemek megfelelően vannak behelyezve.

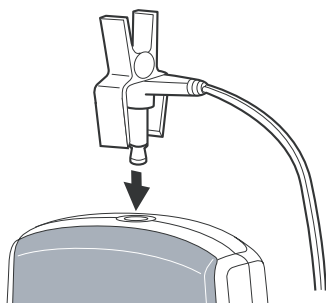


1. A csipetős biztonsági dugót csatlakoztassa a fő egységhez.

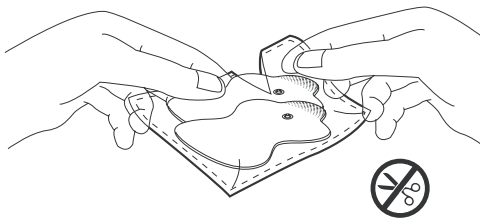

2. Bontsa ki a elektródákat (tappancsokat) a lezárt csomagból.

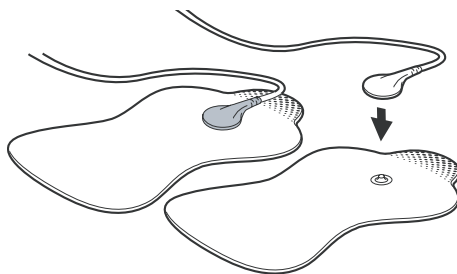

3. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a tappancsokhoz.

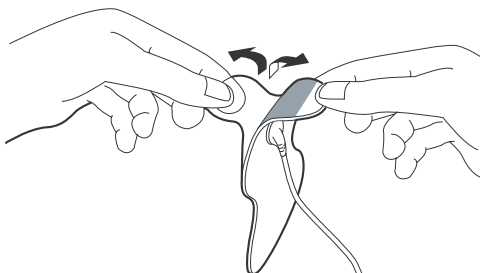

4. Távolítsa el a védőfóliát a tappancsokról, és helyezze közvetlenül a bőrére.
Figyelem! Ne sértse meg a tappancsok tapadó felületét!

4.3 Az elektródák felhelyezése

Figyelem! Mindig tiszta tappancsokat használjon!

Figyelem! Ne hajtsa össze a tappancsokat!

Figyelem! Vigyázzon, hogy a tappancsok ne érjenek semmiféle fémtárgyhoz, úgy mint övcsat vagy nyaklánc!

Figyelem! Felhelyezés előtt zsírtalanítsa a bőrfelületet!



Helyezze a tappancsokat a felső karra, ahol érzi a fájdalmat!




Helyezze a tappancsokat mindkét vállra úgy, hogy középen legyen a gerinc!




Helyezze az egyik tappancsot a talpra, a másikat a lábikrára!


Figyelem! Ne használja egyidejűleg mindkét talpon a tappancsokat!

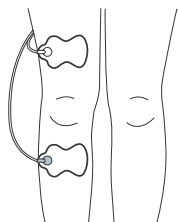

Helyezze a tappancsokat a lábikrára, ahol fájdalmat érez!

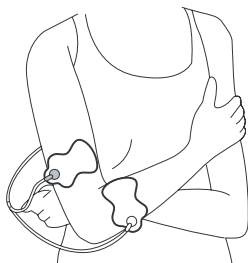

Helyezze a tappancsokat a fájó ízületek két oldalára!

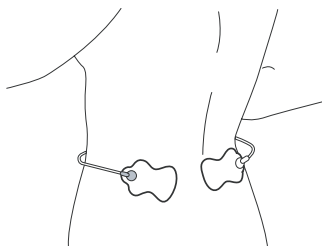


Helyezze a tappancsokat a derékra, a gerincet közrefogva!


5. A kezelés technikája

Figyelem! Győződjön meg, hogy a különböző egységek jól vannak összekapcsolva, a tappancsok a kezelendő testrészen fixen vannak elhelyezve!

Figyelem! Ne húzza ki az elektromos vezetékét a kezelés alatt!

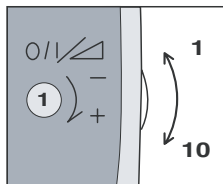


Megjegyzés: Használja az erősség szabályozó kapcsoló gombot (1-10), ha szükséges.

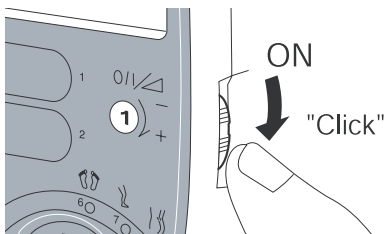


5.1 Kezelő program

1. Kapcsolja a Be/Ki kapcsoló gombot az egyesre (1)!

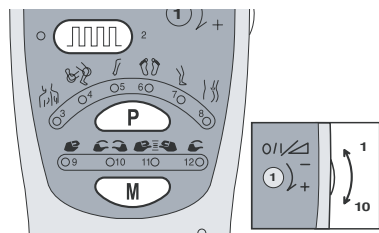


2. A tizenkét program közül a panaszainak megfelelően válasszon ki egyet!

5.2 Beállítás

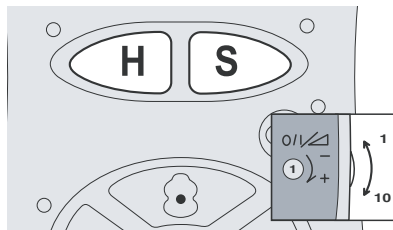


1. Válassza az Erős (H - Hyper) módot vagy a Kíméletes (S - Soft) módot!


A Hyper mód kiválasztásához három másodpercig tartsa lenyomva a Hyper gombot!

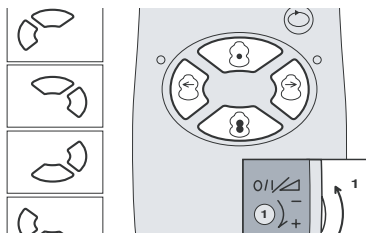

2. Válassza ki a "pont", vagy a "széles" funkciót.

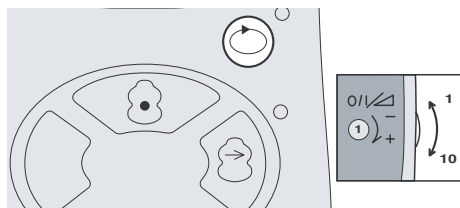


3. Az ismétlő gomb megnyomásával az előző részkezelés újra kezdődik.

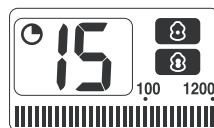


A program 15 percig tart.

6. A kezelés befejezése és karbantartás

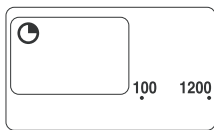

15 perc múltán a készülék automatikusan kikapcsol

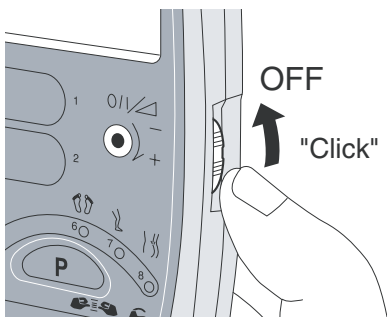


1. Állítsa le a programot, ha szükséges!

Figyelem! Állítsa le a kezelést, ha meg akarja változtatni a kezelői programot!


Figyelem! Állítsa le a kezelést, ha át akarja helyezni az elektródákat (tappancsokat)!

Figyelem! Állítsa le a kezelést, ha akár a testének, akár a bőrének kellemetlen!


Figyelem! Állítsa le a kezelést, ha a készülék nem megfelelően működik, vagy kellemetlen érzést okoz!

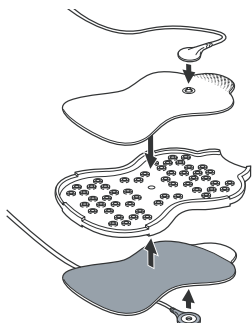


2. Távolítsa el a tappancsokat, és helyezze el a tappancstartóra.

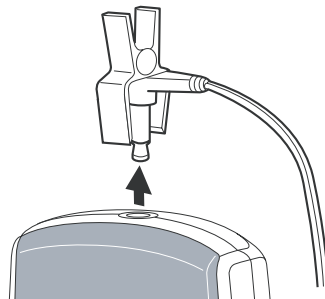

3. A biztonsági csatlakozó dugót csipeszelje ki, és távolítsa el a készüléktől!

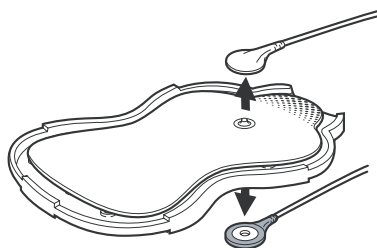


4. A vezetéket távolítsa el a tappancsokról!

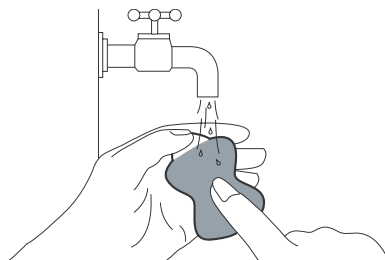

5. Az ujjbeggyével finoman mossa meg a tappancsokat gyenge sugarú folyóvíz alatt kb. 3 másodpercig.

Figyelem! Ne használjon forró vizet!

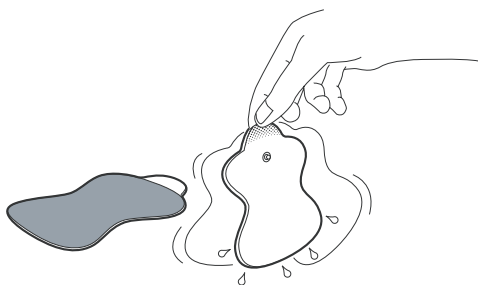


6. Szárítsa meg a tappancsokat!

Figyelem! Ne dörzsölje a tappancsokat!



Figyelem! Hagyja a levegőn, magától megszáradni!

Figyelem! A tapadó felület felfelé legyen a száradás ideje alatt!

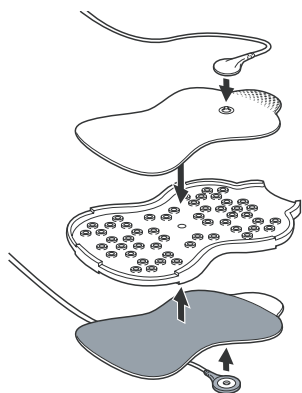

7. Kapcsolja össze a vezetékét a tappanccsal és helyezze a tappancsokat a tartóra.


8. A tartólap köré tekerje fel az elektromos vezetékét!

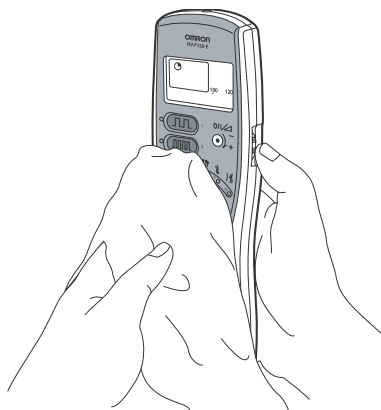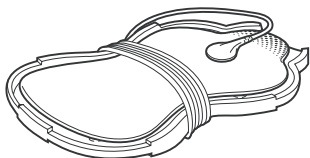

9. Használjon lágy, enyhén nedves ruhát a készülék tisztításához!

Figyelem! Ne mossa és ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló oldószert!

7. Tárolás

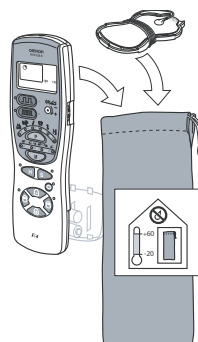

Tegye a készüléket és a tappancstartót a tároló tokba!

Száraz, zárt helyen -20 és 60°C között tárolja a készüléket!

Figyelem! Ha hosszabb ideig (több mint három hónap) nem használja a készüléket, akkor távolítsa el belőle az elemeket!

8. Hibaelhárítás és karbantartás

Probléma	Mi okozza	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Az elemek rosszul vannak behelyezve vagy lemerültek	Tegyük be helyesen az elemeket vagy cseréljük újakra
Túl hamar kikapcsol	A tappancsok nem érintkeznek a bőrrel, vagy az elemek gyengék	Helyezzük fel a tappancsokat megfelelően
Kezelés közben a készülék kikapcsol	Az elemek gyengék/kimerültek	Cseréljük ki az elemeket két új, 1,5V-os alkáli AAA LR03-as elemre.
	A kezelési idő - 15 perc letelt, és a készülék automatikusan kikapcsolt	Indítsuk újra a kezelést, vagy kapcsoljuk ki a készüléket
	Elektródakábel megszakadt	Cseréljük ki az elektródakábel
A tappancsot nehéz felhelyezni a bőrre	A védőfólia nincs eltávolítva a tappancsról	Vegyük le a védőfóliát a tappancsról
	A tappancsot közvetlenül tisztítás után helyeztük fel	Szárítsuk meg a tappancsot
	A tappancs tapadófelülete megsérült	Cseréljük ki a tappancsot
A tappancs tapadófelülete nyúlékony, meglágyult	A tappancsot izzadt felületen használtuk	Tegyük a tappancsot a fagyasztoába egy éjszakára
	A tappancsot túl sokáig, vagy túl sokszor mostuk	
	A tappancsot magas hőmérsékleten, túl magas páratartalomban, vagy direkt napsugárzásban tároltuk	
Nem igazán érezzük a masszírozást	A tappancsokat nem megfelelően helyeztük fel	A tappancsokat helyezzük finoman a bőrre
	A tappancsok egymáshoz érnek	Szüntessük meg a tappancsok átfedését
	A csatlakozókábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassuk a kábelt megfelelően
	A kiválasztott intenzitás gyenge	Növeljük az erősséget a szabályozógombbal
A bőr pirossá válik, vagy kellemetlen érzést érzünk	A tappancsok felülete beszenyeződött, vagy száraz	Mossuk le a tappancsok tapadófelületét kb. három másodpercig, ujjbeggyel, folyó vízben
	A tappancsok tapadófelülete sérült	Cseréljük ki a tappancsokat

8.1 Karbantartás és tartalék alkatrészek.

Ne javítsuk magunk a készüléket. Bármilyen rendellenesség észlelésekor keressük fel a márkaszervizt, vagy a hivatalos Omron képviselőt.

8.2 Elemek cseréje.

Távolítsuk el a használt elemeket az elemtartóból és helyezzünk be két egyforma új elemet.



A termék megfelelő leadása

(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméket élettartama végén a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni. A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal hogy a hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Annak érdekében hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladéklerakás által okozott környezet és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról a hulladékok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el

az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt. A használt elemeket élettartama végén a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni.

9. Műszaki adatok

Termék megnevezése:
Típus:
Tápfeszültség:
Elem élettartama:

OMRON E4 TENS készülék
HV-F 128-E
3 V DC (2db 1,5 V-os alkáli elem AAA LR03)
kb. 3 hónap, ha napi 15 percet használjuk
kb. 2 hónap, ha hyper üzemmódban használjuk napi 15 percet
kb. 1-től 1200 Hz
kb. 85 mA
10 °C 40 °C, 30 - 85 % páratartalom
-20 °C - 60 °C, 10 - 95 % páratartalom
60 x 199 x 21 mm
kb. 155 g (elemekkel együtt)
Elektromos kábel
Long Life tappancspár (hosszú élettartamú)
Elem 2db (1,5 V alkáli AAA LR 03)
Elektródátartó lap
Szövet tok
Kezelési utasítás

Frekvenciatartomány:
Aramfelvétel:
Működési hőmérséklet és páratartalom:
Tárolási hőmérséklet és páratartalom:
Készülék méretei:
Súly:
Tartozékok:

A műszaki tulajdonságok előzetes bejelentés nélkül változtathatók!

BF típus 



A használati utasítást figyelmesen olvassa el!

A készülék megfelel az EC 93/42/EEC (Orvosi eszközökre vonatkozó) előírásainak

Gyártó: Omron Matsusaka Co. LTD. Japán
EU képviselet
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp
Postbus 13 NL 2130 AA Hoofddorp, Hollandia
www.omron-healthcare.com

Leányvállalat: OMRON HEALTHCARE (UK) LTD West Sussex
18-20 The Business Park BN5 9SL
Henfield England
Tel: 0845 130 8050
Fax: 01273 495123
Email: information@eu.omron.com

OMRON MEDIZINTECHNIK, Handelsgeellschaft mgH
Windeckstrasse 81a
D-68163 Mannheim
PZN: 30 98 577
Germany
Cikkszám: 053 000 000
www.omron-medizintechnik.de



JÓTÁLLÁSI JEGY

KEDVES VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK AZ ALÁBBIKAT A JÓTÁLLÁSI JEGY ÉRVÉNYESSÉGÉT ILLETŐEN.

Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését az eladó szerv részére előírt rovatban és a javítási szelvényeken!
Elveszett jótállási jegyet a jótállást vállaló csak az eladás napjának hitelt érdemlő (dátummal és bélyegzővel ellátott) számla vagy eladási jegyzék esetén pótol.

A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK, AZOK ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉNEK HATÁRIDEJE, HELYE, ÉS FELTÉTELEI:

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉRVÉNYESSÉGE: A vásárlás tényét, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal kell igazolnia. Ez lehet a blokk, vagy az egyedileg érvényesített jótállási jegy.

A jótállási jegyen a vevő által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Mentessük a jótállási kötelezettség alól, ha mi, vagy az általunk jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy az átadás után a meghibásodás az alábbi okok miatt keletkezett, illetve következett be:

- rendellenes használat,
- szakszerűtlen kezelés,
- idegen, illetőleg szakszerűtlen beavatkozás,
- helytelen tárolás,
- elemi kár,
- a gyártó hibáján kívül álló ok következménye eseteiben (pl. tisztítás).

A szabálytalan használat elkerülése céljából kérjük tanulmányozza át a készülékhez mellékelt használati utasítást. Kérjük, tartsa be a használati utasításban felsorolt

- szállítással, - bekapcsolással, - a készülék kezelésével kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

Ezek be nem tartása esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. A jótállási igényt a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint intézzük.

A FOGYASZTÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE:

- A fogyasztó a kijavítás iránti igényét elsősorban a forgalmazónál jogosult bejelenteni.
- A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett szerviznél közvetlenül is érvényesítheti.
- A meghibásodott készülék jótállási jegyen feltüntetett szervizbe történő eljuttatásának és a megjavított készülék fogyasztó részére történő visszajuttatásának költsége a fogyasztót terheli.

A termék kijavítása esetén a jótállási időtartam meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem használhatta.

Javítás esetén a termékbe kizárólag új alkatrész helyezhető. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítás és a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A TERMÉK CSERÉJÉT LEHET KÉRNI AZ ALÁBBI ESETEKBE:

Ha a termék a garancia ideje alatt

- a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik,
- valamilyen oknál fogva nem javítható,
- javítás után nem válik használhatóvá,
- a javítási időtartam 30 napnál hosszabb.

A vevő kívánására azonos típusú új termékre kell kicserélni, vagy ha erre nincs mód, a termék vételárát vissza kell téríteni.

A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:157. és 6:158. paragrafusában és a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. Jelen jótállás a fogyasztó más törvényekből eredő jogait nem érinti.

KÉRJÜK, HOGY MEGHIBÁSODÁS ESETÉN EZT A JÓTÁLLÁSI JEGYET A KÉSZÜLÉKKEL EGYÜTT JUTTASSA EL A SZERVIZBE! A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG!

Eladószerv tölti ki!

Sorszám:

Forgalmazó:
(Kérjük nyomtatott betűvel, vagy bélyegzővel kitölteni!)

Termék neve, típusa:

Gyári szám:
(Kérjük jól olvashatóan kitölteni!)

Gyártó neve és címe: OMRON Healthcare Co., Ltd. 24, Yamanouchi Yamanoschita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japan

201hó.....nap

A vásárlás és a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásának napja (jól olvashatóan)

Importálja: HUNGIMPEX Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

Tel.: 06-1/453-7100; Fax: 06-1/453-7101 info@hungimpex.hu

A fenti készülékre a vásárlás napjától számított **36 hónapig** jótállást vállalunk a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet szerint.

A kiegészítő tartozékokra (pl.: izzó, elem) a garancia nem vonatkozik

Illetéktelen személy általi beavatkozás, vagy a nem megfelelő használatból eredő károk esetén a garancia érvényét veszti!

Szervizünk: HUNGIMPEX/ PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. Központi Szerviz Tel.: 06-1/453-7100; Fax: 06-1/453-7101

Javítási szelvények

<p>A szelvény</p> <p>A javítási igény bejelentésének időpontja:.....</p> <p>Javításra átvétel időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>A hiba oka.....</p> <p>Javítás módja:.....</p> <p>A jótállás új határideje</p> <p>A visszaadás időpontja:.....</p> <p>Megjegyzés</p> <p>Szerviz neve</p> <p>Kelt</p> <p>P.H.</p> <p>Eladás kelte:</p> <p>Gyártási szám:</p>	<p>B szelvény</p> <p>A javítási igény bejelentésének időpontja:.....</p> <p>Javításra átvétel időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>A hiba oka.....</p> <p>Javítás módja:.....</p> <p>A jótállás új határideje</p> <p>A visszaadás időpontja:.....</p> <p>Megjegyzés</p> <p>Szerviz neve</p> <p>Kelt</p> <p>P.H.</p> <p>Eladás kelte:</p> <p>Gyártási szám:</p>
<p>C szelvény</p> <p>A javítási igény bejelentésének időpontja:.....</p> <p>Javításra átvétel időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>A hiba oka.....</p> <p>Javítás módja:.....</p> <p>A jótállás új határideje</p> <p>A visszaadás időpontja:.....</p> <p>Megjegyzés</p> <p>Szerviz neve</p> <p>Kelt</p> <p>P.H.</p> <p>Eladás kelte:</p> <p>Gyártási szám:</p>	<p>D szelvény</p> <p>A javítási igény bejelentésének időpontja:.....</p> <p>Javításra átvétel időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>A hiba oka.....</p> <p>Javítás módja:.....</p> <p>A jótállás új határideje</p> <p>A visszaadás időpontja:.....</p> <p>Megjegyzés</p> <p>Szerviz neve</p> <p>Kelt</p> <p>P.H.</p> <p>Eladás kelte:</p> <p>Gyártási szám:</p>